




FBT、FBR、FB-033 各シリーズに対応しております。
※メーカーオプション
フットボード格納式コントローラ

ベッド上のセンサーでご利用者の体動や離床動作を検知し、ナースコールへ通知します。

POINT 1 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。

1. 動き出しモード


利用者様がベッド上で動き出した時に通知します。

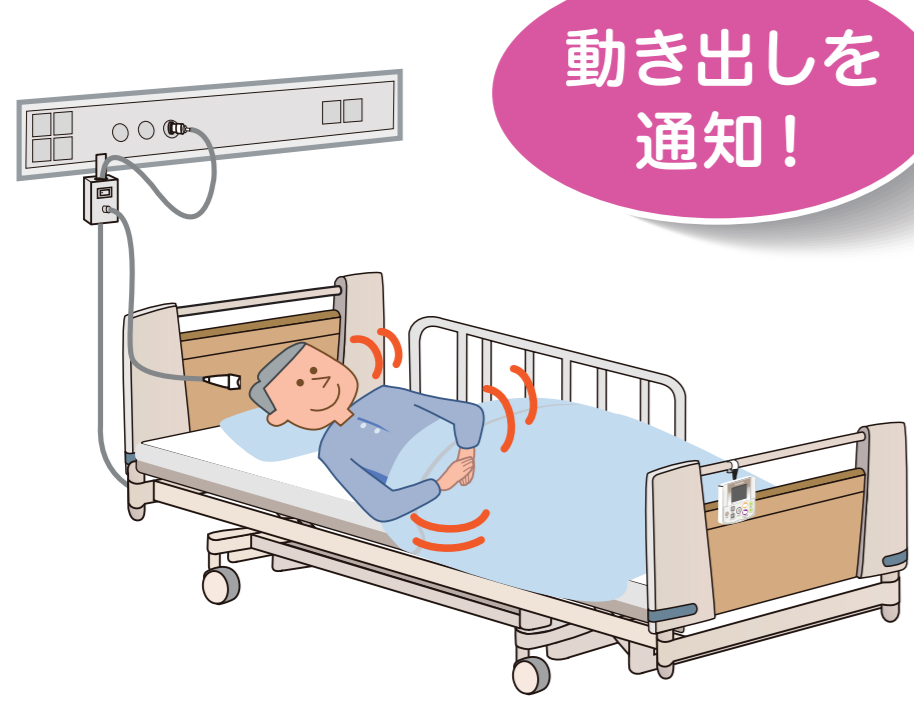

動き出しを通知!

2. 起上がりモード


利用者様がベッド上で起き上がった時に通知します。

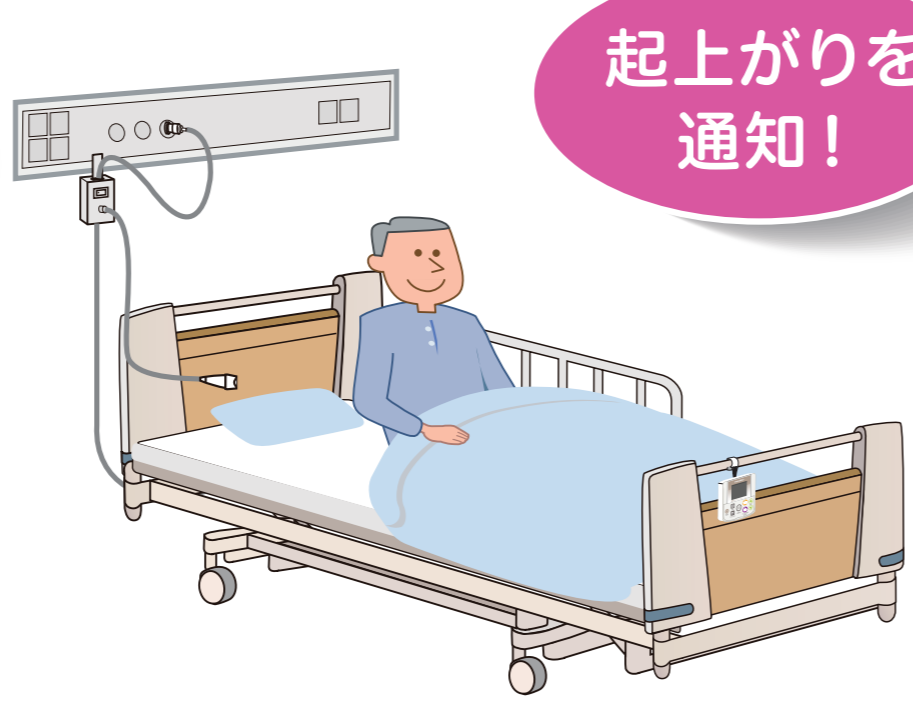

起上りを通知!

3. 端座位モード


利用者様がベッド上で端座位になった時に通知します。

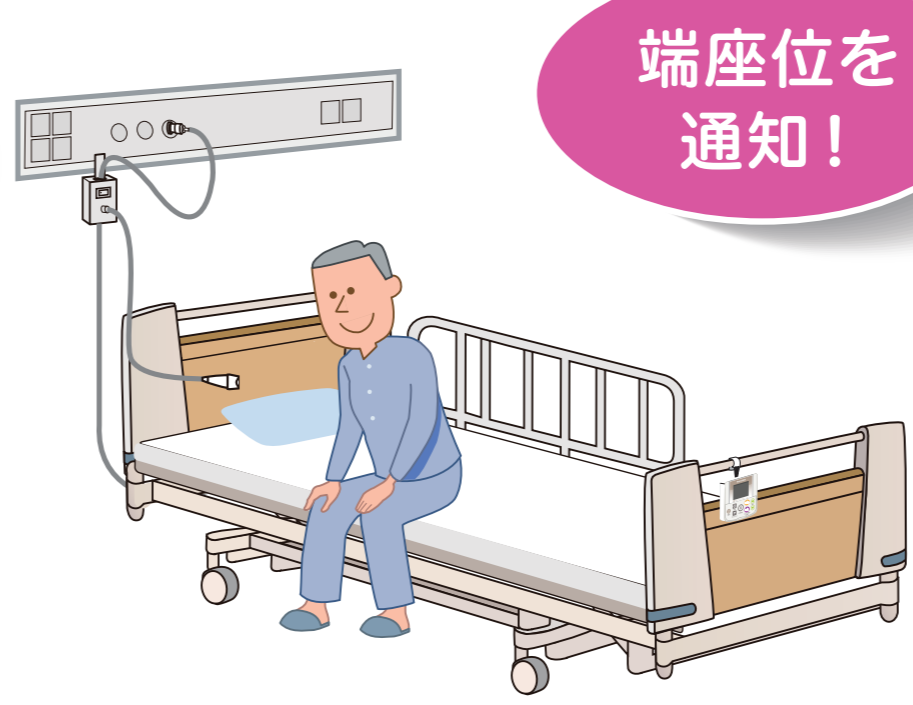

端座位を通知!

4. 離床モード

利用者様がベッドから離床した時に通知します。

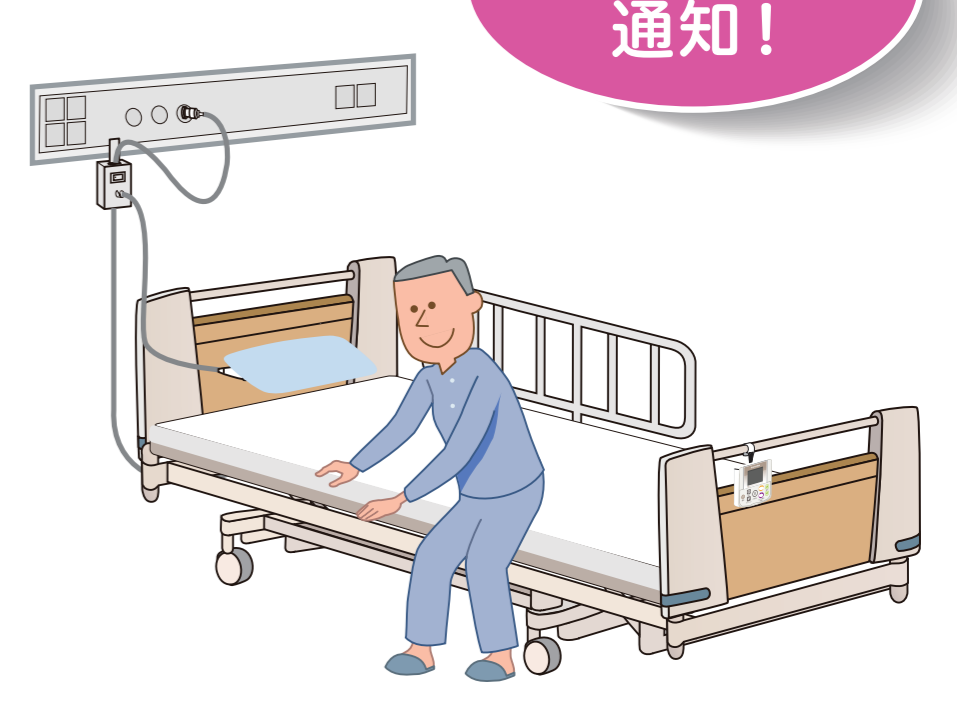


離床を通知!

離床時も再通知! 離床した時も再度通知します。

離床時も再通知!

5. 離床管理モード

離床後一定時間経過してもベッド上に戻らない事をお知らせします。

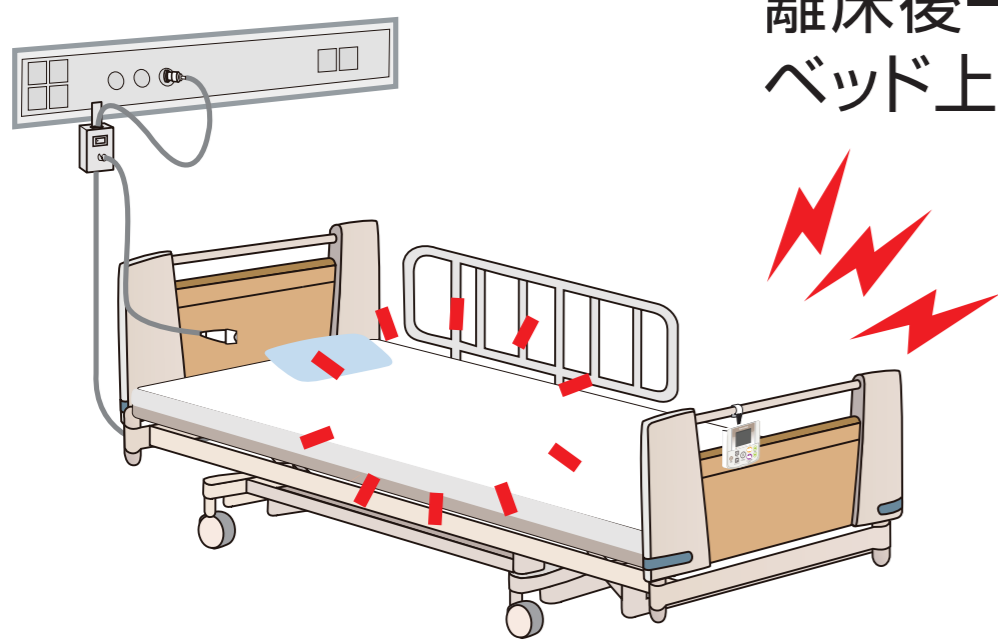


戻らないことを通知!

POINT 2 自動見守り再開機能

介助時や食事の際に一時停止しても、ベッド上に戻れば再設定することなく、自動で再開します。


POINT 3 体重測定機能

利用者様のおおよその体重を測定できます。体重の履歴表示が可能です。

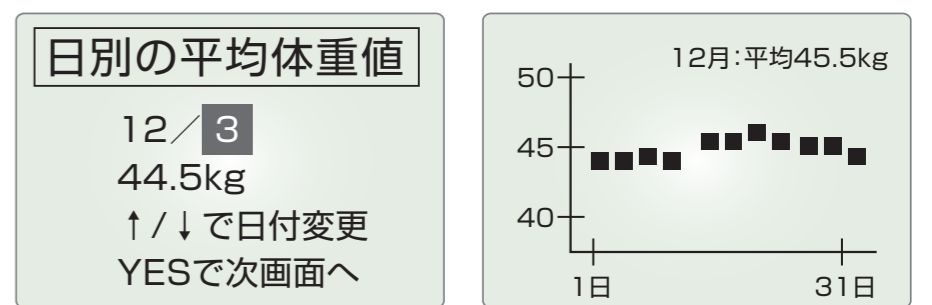


POINT 4 らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ

操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に設定・操作ができます。誤操作を防ぐキーロック機能付きです。


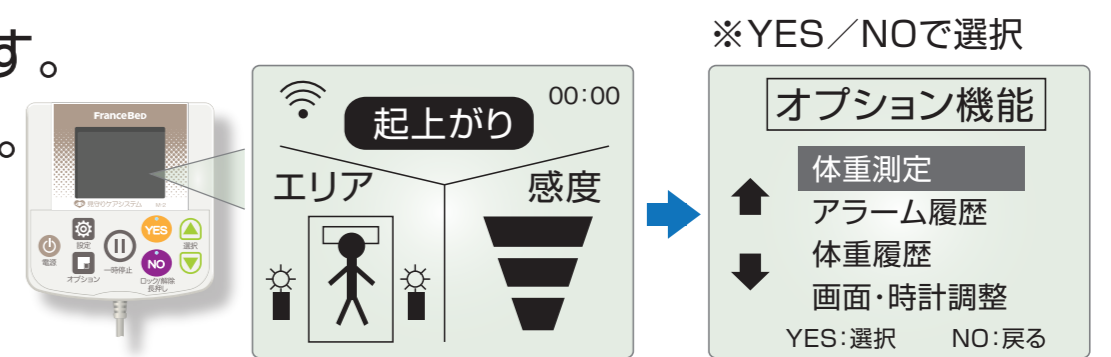


■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。(別売)

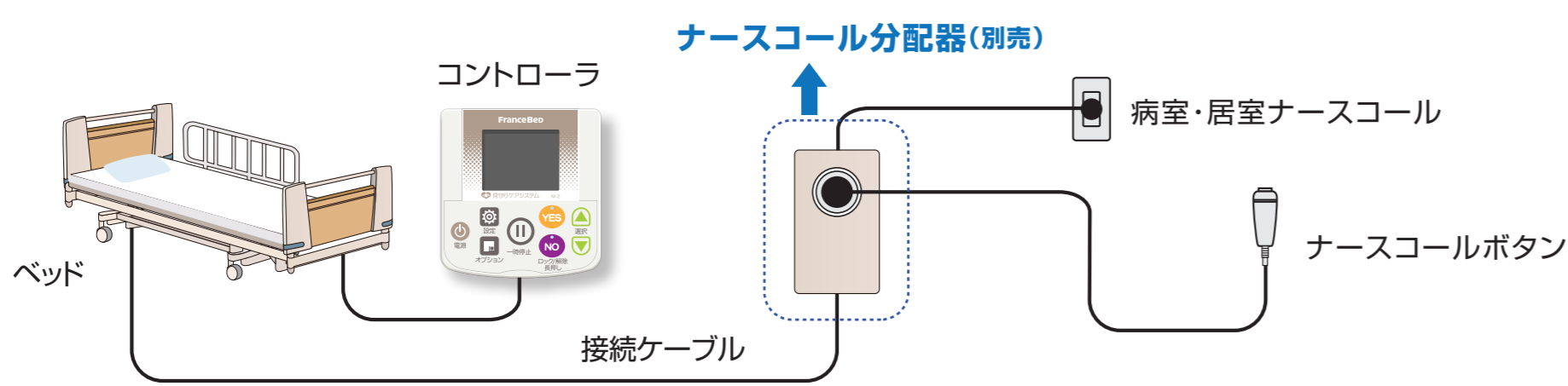

行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示などさらに詳しい情報を取得できます。(オプション)

POINT 5 SDカードに記録された行動履歴を確認。

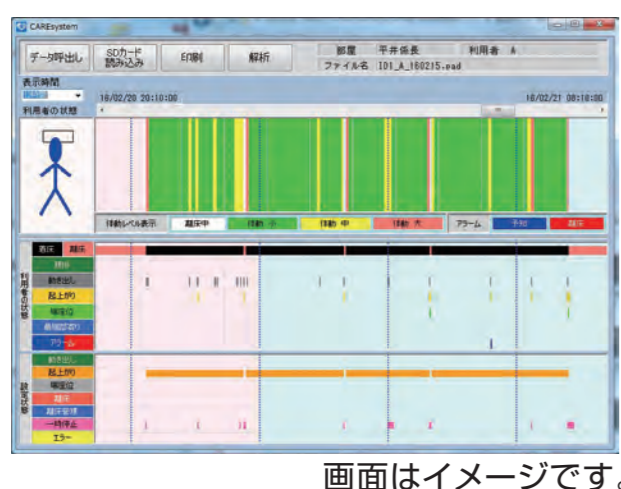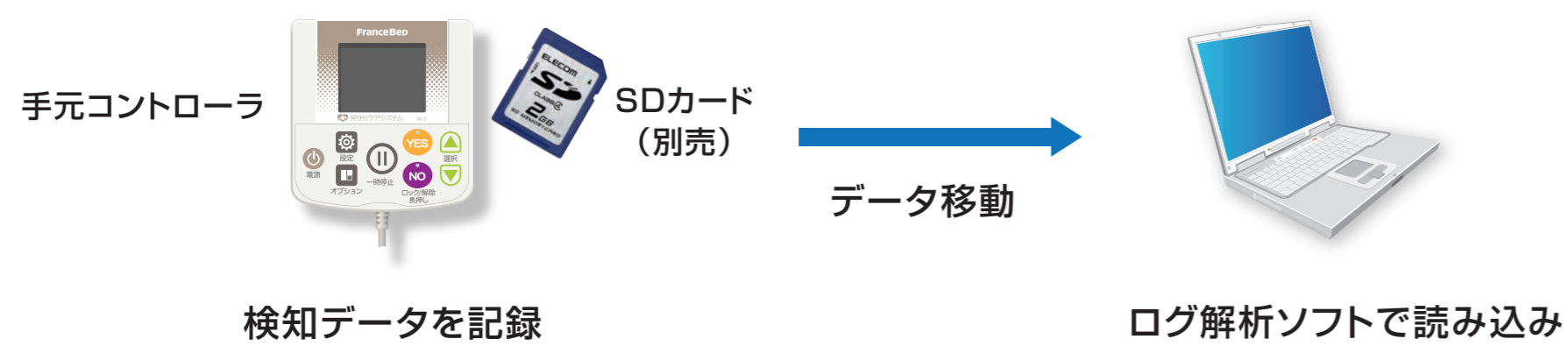

ログ全体画面

- ベッド上での睡眠(体動履歴の確認)
- ナースコールアラートの時刻、回数等
- ベッド上の位置、状態確認

画面はイメージです。



週別解析画面

- 1週間の利用者の状態をまとめて表示して解析できます。
- 一週間の利用者様の行動記録の確認・分析

画面はイメージです。

POINT 6 ナースコール+Wifiでのリアルタイムの状態表示可能。

